

Digital Height Meter [Manual]

Size:W182*H257mm **K**

Front

バスのデジタル身長計

Digital Height Meter

電池セット (交換方法)

本体底面の蓋を開けて、単四乾電池3本(別売)を右図のように＋－の向きに注意していれます。
電池を入れて底面の電池蓋を閉じます。ピーという音が出たら準備完了です。

※注意※

本製品は超音波を使用し測定を行っています。
測定は、平らな床の上で半径40cmの範囲に物がない場所で測定をしてください。

「故障かな？」と思ったら

- **E の表示が出る**
測る距離が短すぎたり、長すぎたりしていませんか？身長計の測定範囲は40cm～200cmです。測定範囲内でご使用ください。
電池が消耗していませんか？電池を交換する時は3本セットで交換してください。
※センサーのメッシュ部分に破損があるとエラーになります。
- **液晶表示が薄くて見えない、映らない**
電池が消耗していませんか？電池を交換する時は3本セットで交換してください。
- **測定結果が異常**
近くに音の出るものがありませんか？身長計は超音波を使って測定しています。近くに音の出るものがあると測定の妨げになることがあります。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を交換するときは、常に新しい電池を3本セットで交換してください。●電池は＋，－の極性に注意し、正しく取り扱ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●お風呂やシャワー室で保管、使用しないでください。本商品は防水仕様ではありません。●濡れた手で電池を交換しないでください。●投げたり強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。●長時間ご使用にならない場合は必ず電池を抜いて保管してください。(長時間にわたって放置すると、電池の腐食、自然放電につながり、液漏れや破裂の原因になります。●テレビ等の強力な電波・磁気などが発生する場所、高温多湿・直射日光の当たる場所、ほこりの多い場所でのご使用や保管は故障の原因となります。●使用済みの電池は、各自治体の指示に従って廃棄してください。●センサー部分を押さないでください。測定できなくなります。

<使用上のお願い>

- 本製品を分解・改造しないでください。
- 測定を行う場合は、安全な場所を確保してください。
- 本来の目的以外の使用はしないでください。
- 無理な体勢で測定はしないでください。
- 本製品は測定に超音波を使用しています。使用中に気分が悪くなったり、異常を感じた時には直ちに使用をやめてください。
- ヒビ・擦り傷の入ったものは、破損の恐れがありますので、使用しないでください。
- 3歳未満のお子様の手の届かないところで保管してください。
- 身長計で測ることのできる測定範囲は40cm～200cmになりますが、40cm未満、160cm以上を測定した場合、測定精度の範囲を超える場合があります。



<仕様>

- 身長計
- 最大測定範囲：200cm
- 最小測定範囲：40cm
- 精度：40～160cm / ±0.8cm
- ※当社基準で測定した場合

取扱説明書

保証書付

- ①本体底面のくぼみに指などをひっかけ、矢印の方向に力を加えながら手前に引いてください。
- ②電池の向きに注意してセットし、電池カバーをもどしてください。

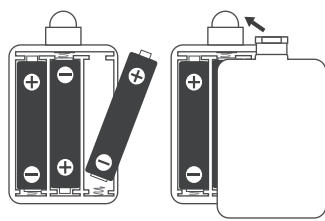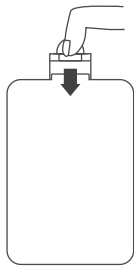

主要部の名称

センサー

このセンサーが超音波を出し、床との距離で測定しています。



表示部

数字は小数点第1まで表示されます。



スイッチ

軽く押すだけで身長が測れます。

電池蓋

保証規定

所定事項記入及び記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

保証規定

保証期間(ご購入日より1年間)内において、この取扱説明書にそった正常なご使用状態で万一故障が生じた場合には、この保証書に記載された期間および保証規定により修理致します。ご使用による汚れ、傷、外形上の変化は対象外です。

保証期間中でも、次の場合は有料修理、調整となりますのでご了承ください。

- 1・保証書の提示がない場合。
- 2・保証書に購入店の捺印、および購入年月日の記録がない場合。
- 3・保証書の所定事項が未記入、あるいは字句を書き換えた場合。
- 4・誤った使用、取り扱い不注意による故障の場合。
- 5・購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障および損傷の場合。
- 6・火災・地震・水害およびその他の天災・地変等による故障および損傷の場合。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

(株)ハシートップイン(以下「当社」)は、お客様からお寄せいただくお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)につきまして、下記の通り、お取り扱い致します。
当社はお客様の個人情報を適切に管理し、当社が必要と判断する期間、保管させていただきます。
当社は、お客様の個人情報を、お問い合わせの対応や修理およびその確認連絡に利用させていただきます。また、これらの目的のために、協力会社に業務委託をする場合、当社は当該協力会社に対して、適切な管理と利用以外の使用をさせない措置を取るようにします。
当社は、法令に基づく業務の履行(司法・行政などの公的機関からの情報開示の要請等)、また正当な理由がある場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
その他、個人情報に関して適用される法令、規範につきましても遵守するようにいたします。

保証書			
品名	デジタル身長計	品番	
お客様	お名前	販売店	店名
	ご住所		ご住所
保証期間	ご購入日より1年間有効	ご購入日 (販売店が記入)	年 月 日

© Hashy 2025 **MADE IN BANGLADESH**

Back


バスのデジタル身長計

Digital Height Meter

測定方法




垂直な壁や柱などを背にして立ってください。
この時、床面も平らな場所を選んでください。

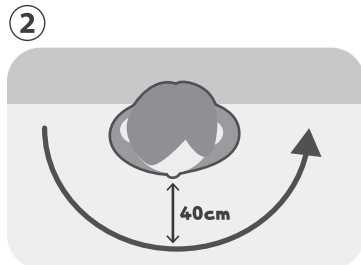


半径 40cm の範囲に物がないことを確認してください。



本体のリアを壁や柱などにくっつけ、床面と垂直になるようにしてください。

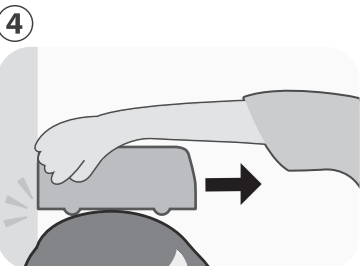

本体のフロントが正面を向くようにし、底面を頭にしっかりとつけて動かないよう固定してください。

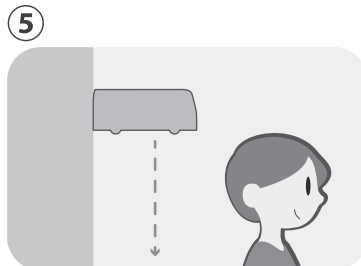

位置が定まったら、本体の下から離れてボタンを押してください。


- ※この時本体を動かしてしまうと正常に測定できなくなります。
- ※2つの穴のセンサーはふさがないようにしてください。




ビビと音がしたら身長が表示されます。

※ビービーはエラー音です。再度測定してください。


正しく使用するためには

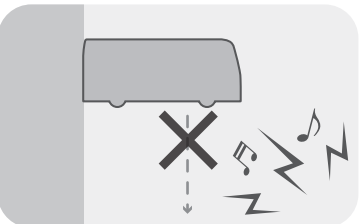


ボタンを押してからピーという音がするまで静かにお待ちください。
この間に大きな音を立てると、正しく測定されない場合がございます。

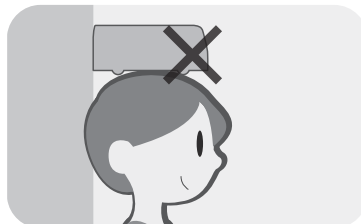


測定する対象の方を本体の下に立たせたままですと、床面まで超音波が届かず測定ができません。

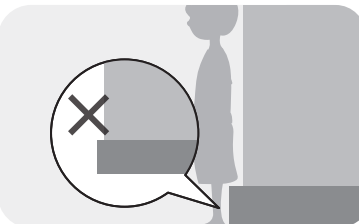


壁や柱などの下に出っ張りのあるような場所では、正しく測定ができない場合があります。垂直な壁や柱のある場所で測定してください。

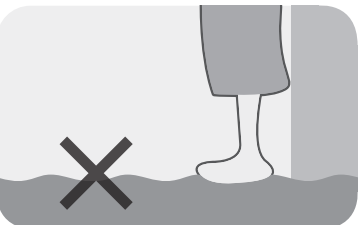

カーペット、畳などのやわらかい床面の場合は正しく測定されない場合がございます。フローリングなどのかたい床面で測定してください。

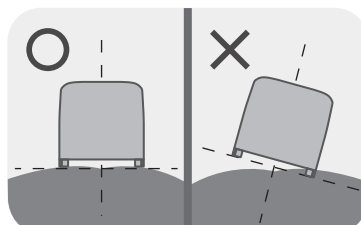

本体の向きが床面に対して垂直になるように測定してください。斜めに向いてしまうと、正しく測定されない場合がございます。

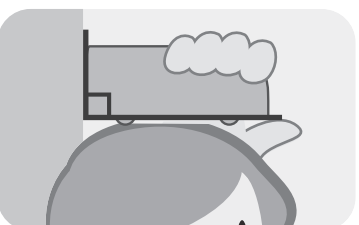

本体のリアと壁や柱などが垂直になるように測定してください。

Hashy

発売元：株式会社ハシートップイン
東京都墨田区東向島 6-5-13
商品に関するお問い合わせはこちら
TEL：03-6657-1841
月～金 (祝日除く) 10時～16時
WEB：右記QRコードから24時間受付

